

Somno Solutions Morning Aligner



English

Español

Estimado paciente,

Somno Solutions le agradece que use nuestro dispositivo Somno Solutions Morning Aligner para el reposicionamiento mandibular y dental después del uso de los dispositivos de avance mandibular.

En esta guía encontrará las indicaciones para el correcto uso y mantenimiento del dispositivo.


Podrá encontrar más información en nuestra web: www.somnosolutionslab.com

1. Guía de uso

Indicaciones de uso:

Somno Solutions Morning Aligner es un dispositivo indicado para pacientes que usan diariamente un dispositivo de avance mandibular (DAM) para el reposicionamiento mandibular y contrarrestar los movimientos dentales después del uso del DAM.

Es recomendable usar el dispositivo diariamente y realizar el movimiento de contacto con la guía de fuera a dentro durante al menos 5 min.

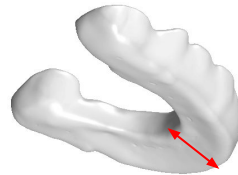

Contraindicaciones:

El uso de los dispositivos Morning Aligners están contraindicado en pacientes con problemas periodontales avanzados y en pacientes menores de 18 años.

2. Dispositivo D2S

El dispositivo Somno Solutions Morning Aligner está compuesto por una férula superior o inferior que cuenta con una rampa que guía a la arcada opuesta a la posición de mordida de mordida habitual del paciente.



3. Colocar y retirar

Colocar el dispositivo:

- Introduce el dispositivo en boca.
- Presiona con los dedos para encajar la férula correctamente en los dientes.

Retirar el dispositivo:

- Extrae la férula tirando poco a poco de los laterales izquierdo y derecho.
- Extrae la férula de boca.

4. Mantenimiento

Se recomienda las siguientes pautas para un correcto mantenimiento del dispositivo:

- Lavarse los dientes antes de usar el dispositivo.
- Después de cada uso, limpiarlo con un cepillo de dientes suave, agua fría y jabón neutro.
- Secar la humedad interior y exterior.
- Conservar el dispositivo en su bote de almacenamiento y en un lugar seco.

Advertencias:

- Si usa pastillas limpiadoras, asegurarse de que no contienen cloro.
- No usar pasta dental para limpiar el aparato.
- No usar agua caliente para enjuagar el dispositivo.
- La falta de higiene bucal, la humedad, el sol, el tabaco, los líquidos con colorantes, la sangre, etc deterioran el dispositivo.

5. Precauciones y advertencias

El uso del dispositivo Somno Solutions Morning aligner puede causar los siguientes efectos secundarios:

- **Sensibilidad gingival.** Durante su uso puede aparecer sensibilidad gingival debido al restablecimiento de la posición dental y de mordida normal.
- **Sensibilidad dental.** Durante su uso puede aparecer sensibilidad dental debido al restablecimiento de la posición dental y de mordida normal.
- **Aumento de la salivación.** Puede aparecer en las primeras semanas de uso.
- **Sequedad bucal.** Puede aparecer en las primeras semanas de uso.
- **Cambios de mordida.** Puede aparecer después del uso y desaparece a las pocas horas. Se recomienda el uso del mordedor.
- **Dolor en los músculos de la mandíbula y en la articulación temporomandibular.** Debido al restablecimiento de la posición de la posición mandibular y dental. Se recomienda realizar ejercicios de movilidad mandibular.

Mordedor



[Pincha aquí para consultar las instrucciones de uso.](#)

Ejercicios de movilidad



[Pincha aquí para consultar las instrucciones de uso.](#)

Si los efectos secundarios continúan, póngase en contacto con su especialista del sueño.