


SOMNO SOLUTIONS D2S

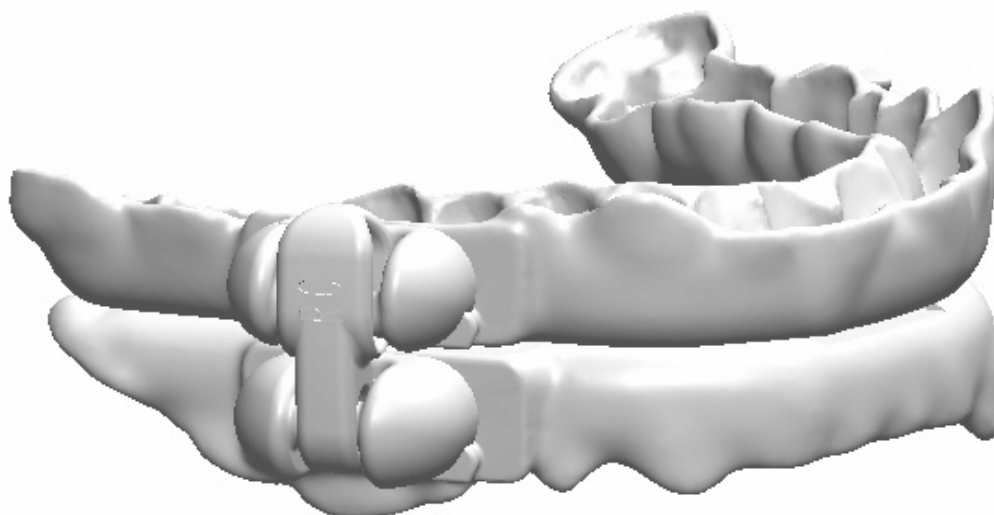

Somno Solutions D2S es un dispositivo de avance mandibular personalizado para cada paciente. Está compuesto por una férula superior (A), una inferior (B) y unos conectores (C) ubicados en ambos lados de la férula, que son los encargados de mantener el avance mandibular y facilitar la respiración. Además, permiten los movimientos de lateralidad y apertura para una mayor comodidad durante su uso.

Está indicado para pacientes roncadores, con apnea obstructiva del sueño e intolerantes a otros tratamientos para la apnea.



Su uso está contraindicado en pacientes con apnea central del sueño, enfermedades respiratorias graves, problemas periodontales avanzados y en pacientes menores de 18 años.

El dispositivo se diseña en la mordida terapéutica registrada por el doctor. Adicionalmente, cuenta con un conjunto de conectores que permiten regular el avance cada 0,5 mm y con un rango total de 6 mm.

Está fabricado íntegramente en Poliamida 12 (Polilaurinlactama, N°. CAS 25038-74-8), un material con certificación de biocompatibilidad Clase IIa.

La solicitud de Somno Solutions D2S se realiza a través de la plataforma online en:

www.somnosolutionslab.com

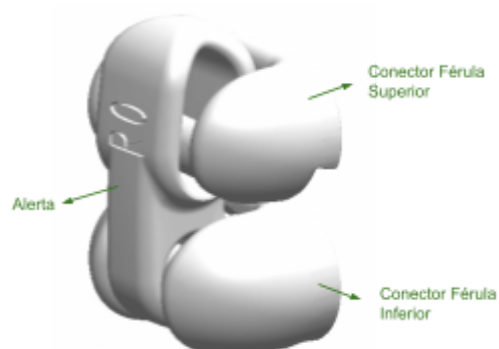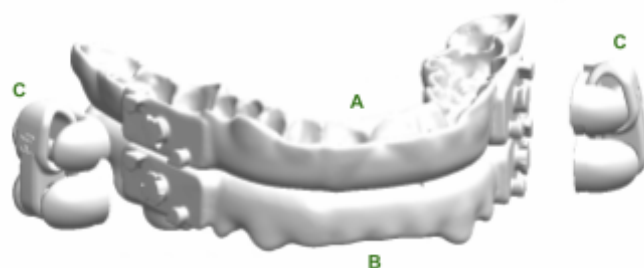

Características Técnicas

Avance protrusivo




- Regulación de avance cada 0,5 mm.
- Retrusión estándar 1 mm.
- Protrusión estándar 5 mm.
- Secuencia personalizable.

Lateralidad




- Lateralidad hasta 5 mm hacia cada lado.
- Sin pérdida de avance en movimiento de lateralidad.
- No se separan las férulas durante el uso.

Apertura

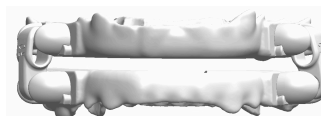

- Longitud de conector mínima.
- Longitud de conector personalizable.
- Limitación de apertura

Volumen

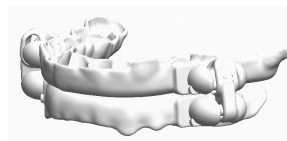

- Espesor de férula de 1,2 mm.
- Mínima Dimensión Vertical.
- Mínimo Volumen vestibular.

Opciones de Personalización


1. Longitud de Conector




2. Apertura frontal




3. Diseño

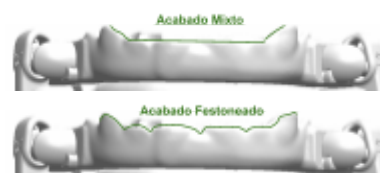

4. Ganchos para gomillas

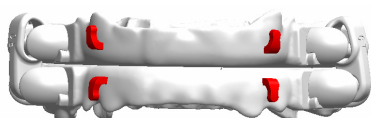

5. Tipo de Banda

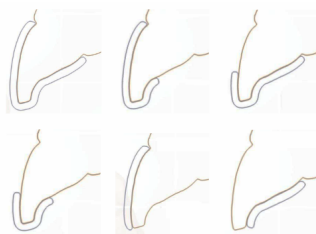


6. Secuencia



Complementos Adicionales al Dispositivo

Férulas

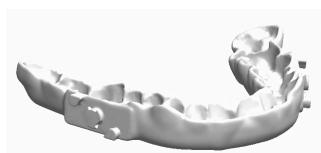

Reimpresión - Planificación en caso de modificaciones dentales, pérdida de férula, necesidad de mayor avance, etc.

Conectores




Reimpresión en caso de pérdida del conector o de necesidad de mayor avance.

Morning Aligner



Dispositivo adicional para el reposicionamiento de la mandíbula.

Mordedor

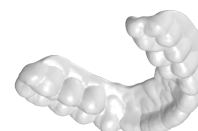

Dispositivo adicional para la reprogramación de la mandíbula.